

ColsigenreFresh™

5 single-use masks, 25ml each
 5 Masken zur einmaligen Verwendung, je 25 ml
 5 masques à usage unique, 25 ml chacun
 5 maschere monouso da 25 ml ciascuna



VEGAN






FRAGRANCE-FREE

Scan me!



colsigen.com

Directions for use / Anwendung /
 Mode d'emploi / Istruzioni per l'uso

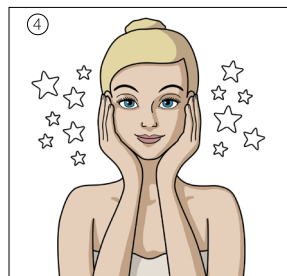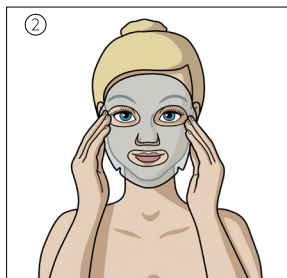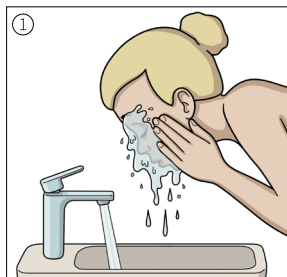

MD	Medical device Medizinprodukt Dispositif médical Dispositivo medico
	Consult instructions for use Gebrauchsanweisung beachten Consultez le mode d'emploi Consultare le istruzioni per l'uso
	Keep out of the reach of children Für Kinder unzugänglich aufbewahren A conserver hors de portée des enfants Tenere fuori della portata dei bambini
	Use by date Verfallsdatum Date limite d'utilisation Data di scadenza
	Do not use if the package is damaged Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Do not re-use Nicht wiederverwenden Ne pas réutiliser Non riutilizzare
LOT	Batch code Seriennummer Numéro de lot Codice del lotto
	Date of manufacture Herstellungsdatum Date de fabrication Data di produzione
	Stratpharma AG, Aeschenvorstadt 57, CH-4051 Basel, Switzerland / Schweiz / Suisse / Svizzera
Date of preparation of this information / Ausstellungsdatum dieser Information / Date de préparation de cette information / Data di revisione del testo: 06/2025	

Stratpharma Switzerland
 Heal Better™

CF000INT1PI01-0225

[EN] Consumer information

Colsigen Refresh is a restorative face mask formulated with Humanized Type III Collagen.

Colsigen Refresh soothes, hydrates, and rejuvenates sensitive or compromised skin, repairing the damage from daily environmental stresses.

How Colsigen Refresh works?

This mask, designed with advanced fabric technology to conform to facial contours, helping to create a barrier that moisturizes evenly and ensures comfort during use.

Colsigen Refresh is designed for daily hydration and care of the skin, the mask supports the skin's natural moisture barrier, enhancing skin hydration and repair.

Colsigen Refresh is gentle enough for everyday use.

Intended purpose (intended use)

Colsigen Refresh is a transient protective barrier, which improves hydration and supports skin repair.

Indications

Intended to be used daily or as needed on all types of skin.

Indicated for dry, irritated and compromised skin.

Intended users

Colsigen Refresh is indicated for adults, children, and people with sensitive skin.

Contra-indications

Not suitable for individuals allergic to any of the ingredients.

Not suitable for use on open wounds or burns.

Warnings and precautions

- For external use only.
- Avoid contact with the eyes.
- If irritation occurs, discontinue use and consult your physician.
- Do not use if the package is damaged.
- Do not use after the expiration (EXP) date printed on the sachet.
- Within the European Union, serious incidents related to the use of Colsigen Refresh should be reported to Stratpharma and the respective competent authority in the country where the user is established.

Ingredients

Mask: 100% plant fiber

Gel: 95% purified water, 4% glycerin

[DE] Verbraucherinformation

Colsigen Refresh ist eine regenerierende Gesichtsmaske, formuliert mit humanisiertem Typ-III-Kollagen.

Colsigen Refresh beruhigt, spendet Feuchtigkeit und revitalisiert empfindliche oder geschädigte Haut, indem es die durch tägliche Umweltbelastungen verursachten Schäden repariert.

Wie wirkt Colsigen Refresh?

Diese Maske wurde mit fortschrittlicher Gewebetechnologie entwickelt, um sich den Gesichtskonturen anzupassen. Sie hilft dabei, eine Barriere zu schaffen, die die Haut gleichmäßig mit Feuchtigkeit versorgt und gleichzeitig ein angenehmes Tragegefühl bietet.

Colsigen Refresh ist für die tägliche Hydratation und Pflege der Haut entwickelt worden. Die Maske unterstützt die natürliche Feuchtigkeitsbarriere der Haut, verbessert deren Hydratation und Regeneration.

Colsigen Refresh ist sanft genug für die tägliche Anwendung.

Verwendungszweck (Anwendungszweck)

Colsigen Refresh bildet eine vorübergehende Schutzbarriere, verbessert die Hydratation und unterstützt die Hautregeneration.

Anwendungsgebiete

Zur täglichen oder bedarfsweisen Anwendung auf allen Hauttypen vorgesehen.

Anwendbar bei trockener, gereizter und geschädigter Haut.

Vorgesehene Anwender

Colsigen Refresh ist angezeigt für Erwachsene, Kinder und Personen mit empfindlicher Haut.

Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Nicht geeignet zur Anwendung auf offenen Wunden oder Verbrennungen.

Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen

- Nur zur äusserlichen Anwendung.
- Kontakt mit den Augen vermeiden.
- Bei Reizungen die Anwendung abbrechen und eine Ärztin oder einen Arzt konsultieren.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.
- Nicht nach dem auf dem Sachet angegebenen Verfalldatum (EXP) verwenden.
- Innerhalb der Europäischen Union sind schwerwiegende Vorkommnisse im Zusammenhang mit der Anwendung von Colsigen Refresh sowohl Stratpharma als auch der zuständigen nationalen Behörde im Land des Anwendenden zu melden.

Inhaltsstoffe

Mask: 100% Pflanzenfasern

Gel: 95% gereinigtes Wasser, 4% Glycerin

[FR] Informations consommateurs

Colsigen Refresh est un masque facial réparateur formulé avec du collagène humanisé de type III.

Colsigen Refresh apaise, hydrate et rajeunit les peaux sensibles ou fragilisées, en réparant les dommages causés par les agressions environnementales quotidiennes.

Comment fonctionne Colsigen Refresh ?

Ce masque, conçu à l'aide d'une technologie de tissu avancée, s'adapte aux contours du visage, contribuant à créer une barrière qui hydrate uniformément et assure le confort pendant l'utilisation.

Colsigen Refresh est conçu pour l'hydratation et le soin quotidiens de la peau, le masque soutient la barrière d'hydratation naturelle de la peau, améliorant l'hydratation et la réparation de la peau.

Colsigen Refresh est suffisamment doux pour une utilisation quotidienne.

Objectif prévu (utilisation prévue)

Colsigen Refresh est une barrière protectrice transitoire qui améliore l'hydratation et favorise la réparation de la peau.

Indications

S'utilise quotidiennement ou selon les besoins sur tous les types de peau.

Indiqué pour les peaux sèches, irritées et fragilisées.

Utilisateurs prévus

Colsigen Refresh est indiqué pour les adultes, les enfants et les personnes ayant une peau sensible.

Contre-indications

Ne pas utiliser chez les personnes allergiques à l'un des ingrédients.

Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes ou des brûlures.

Avertissements et précautions

- Usage externe uniquement.
- Évitez le contact avec les yeux.
- En cas d'irritation, cessez l'utilisation et consultez votre médecin.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration (EXP) imprimée sur le sachet.
- Au sein de l'Union européenne, les incidents graves liés à l'utilisation de Colsigen Refresh doivent être signalés à Stratpharma et à l'autorité compétente du pays où l'utilisateur est établi.

Ingrédients

Masque : 100% fibres végétales.

Gel : 95% eau purifiée, 4% glycérine.

[IT] Informazioni per il consumatore

Colsigen Refresh è una maschera viso rigenerante formulata con Collagene Umanizzato di Tipo III.

Colsigen Refresh lenisce, idrata e rigenera la pelle sensibile o compromessa, riparando i danni causati dalle aggressioni ambientali quotidiane.

Come funziona Colsigen Refresh?

Questa maschera è progettata con una tecnologia avanzata del tessuto che si adatta ai contorni del viso, contribuendo a creare una barriera che idrata in modo uniforme e garantisce comfort durante l'uso.

Colsigen Refresh è progettata per l'idratazione e la cura quotidiana della pelle; la maschera supporta la barriera idratante naturale della pelle, migliorandone l'idratazione e la riparazione. Colsigen Refresh è abbastanza delicata da poter essere utilizzata quotidianamente.

Scopo previsto (uso previsto)

Colsigen Refresh forma una barriera protettiva temporanea, migliora l'idratazione e supporta la riparazione della pelle.

Indicazioni

Da utilizzare quotidianamente o secondo necessità su tutti i tipi di pelle.

Indicato per pelli secche, irritate e compromesse.

Utenti previsti

Colsigen Refresh è indicata per adulti, bambini e persone con pelle sensibile.

Controindicazioni

Non utilizzare in caso di allergia a uno qualsiasi degli ingredienti.

Non indicata per l'uso su ferite aperte o ustioni.

Avvertenze e precauzioni

- Solo per uso esterno.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- In caso di irritazione, sospendere l'uso e consultare il medico.
- Non utilizzare se la confezione è danneggiata.
- Non utilizzare dopo la data di scadenza (EXP) riportata sulla bustina.
- Nell'Unione Europea, eventuali incidenti gravi legati all'uso di Colsigen Refresh devono essere segnalati a Stratpharma e all'autorità competente del Paese in cui si trova l'utente.

Ingrédients

Maschera: 100% di fibre vegetali.

Gel: 95% acqua purificata, 4% glicerina.